



# Trainer Module

## Grúa de techo con soporte dinámico del peso corporal

***Una grúa GH3+ equipada con Trainer Module es mucho más que una solución perfecta de elevación y traslado. También ofrece la posibilidad de proporcionar a los pacientes un soporte dinámico para la movilidad y una actividad de movilidad progresiva mediante ejercicios seguros y asistidos, transferencias funcionales, bipedestación y deambulación inicial en la habitación.***

En el modo Trainer Module, la GH3+ soporta dinámicamente el peso del paciente y permite aliviar hasta 100 kg del peso corporal del paciente.


El Trainer Module tiene una capacidad de 30 minutos de uso continuo cuando la grúa está completamente cargada. Después de 30 minutos, el Trainer Module cambiará automáticamente de modo Trainer a modo Transfer.

El Trainer Module se inicia, controla y supervisa a través del mando a distancia digital. El modo de funcionamiento elegido se indica claramente y, en el modo Trainer, el nivel de aligeramiento del peso y el tiempo de entrenamiento restante se muestran en la pantalla LCD.

En el modo Transfer, la GH3 está inmediatamente lista para elevar y desplazar, prosiguiendo automáticamente la carga con normalidad.



# Transfer Treatment Training

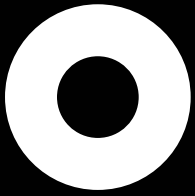

Un sistema,  
múltiples prestaciones

El Trainer Module añade una nueva prestación a las múltiples posibilidades de aplicación que ofrece la grúa de techo de Guldmann, además de las funciones de elevación y descenso.

Con el Trainer Module es posible iniciar las actividades de movilidad mucho antes, con un alivio dinámico del peso, directamente en la habitación del paciente.

Manos libres:  
para centrarse en la  
calidad del entrenamiento

### Actividades de movilidad funcional rutinarias con alivio dinámico del peso:

- Transferencias de la cama a la silla o inodoro
- Equilibrio en bipedestación
- Escalones
- Ejercicio de pie, como cambio de peso y equilibrio sobre una sola pierna
- Sentadillas suaves
- Rango de movimiento activo

### Ejercicios de rehabilitación típicos con alivio dinámico del peso:

- Escaleras y peldaños
- Ejercicios de marcha
- Equilibrio
- Elevación desde la posición sentada a erguida (bipedestación)
- Sentadillas y zancadas

Una solución única,  
simple y flexible

- Rango de movimiento activo
- Hasta 100 kg de alivio de peso en pasos de 1 kg
- Sesiones de entrenamiento de hasta 30 minutos
- Prevención de caídas
- Fácil de usar y supervisar
- El módulo de elevación funciona como una grúa de techo normal cuando no se utiliza para el entrenamiento
- 1 h de carga = 10 min de entrenamiento



Patent pending

Time to care

V. Guldmann A/S  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL  
Tel. +34 6828 75331  
info@guldmann.es  
www.guldmann.es