



Lyftplattform
LP5 & LP5+



ANVÄNDARVÄNLIGA

Lyftplattformarna är enkla och intuitiva att använda och ger en smidig upplevelse för rullstolsanvändare och för personer som har svårt att gå. Båda modellerna har användarvänliga manöverpaneler, antingen inbyggda eller trådlösa, vilket gör att de allra flesta brukare kan vara oberoende.





TILLFÖRLITLIGA OCH SÄKRA

Våra lyftplattformar LP5 och LP5+ är utformade för att harmoniskt passa in i de flesta miljöer – både offentliga utrymmen och privata bostäder. Med en lyftkapacitet på 360 kg och en lyfthöjd på upp till 830 mm, är plattformarna ett perfekt val när man måste övervinna mindre nivåskillnader.

Lyftplattformarna LP5 och LP5+ kan hantera lyft på upp till 690 mm om de är nersänkta i golvet, och upp till 830 mm om de installeras ovanpå golvet. Lyftplattformarna är inte bara robusta utan också tillförlitliga, vilket garanterar trygg och säker tillgänglighet för alla.



Automatiska säkerhetsgrindar

Helautomatisk säkerhetsgrind på nedre nivån (på LP5 + som standard – och på övre nivån (tillval).

Plexiglas

Alla sidor och säkerhetsdörrar är monterade med plexiglas.

Ramp

Automatisk påkörningsramp ingår som standard på den nedre nivån för enkel påkörning och avkörning från plattformen.

INOMHUS- OCH UTOMHUSBRUK

Oavsett om det handlar om en liten nivåskillnad inomhus eller en utomhusmiljö ska tillgängligheten inte begränsas av platsen. Lyftplattformen LP5 är mångsidig och anpassningsbar och passar för både inomhus- och utomhusbruk.

Alla synliga delar levereras i korrosionsbeständigt stål/material – vilket gör denna version av lyftplattformen lämplig för utomhusbruk.

SÄKERHET ÄR EN PRIORITET

Ett tryggt och säkert lyft har högsta prioritet. Lyftplattformarna LP5 och LP5+ kan förses med viktiga säkerhetsfunktioner, som exempelvis säkerhetsgrindar för den övre nivån, utgång till vänster eller höger sida och trådlös drift.

För brukarens säkerhet är lyften utrustad med ett nödstoppsknapp som stoppar lyften omedelbart när den trycks ned. Om nödsänkning av lyften krävs, aktiveras denna funktion genom att vrida på nyckelbrytaren på den vänstra panelen på plattformen.

Som en försiktighetsåtgärd – och för att undvika främmande föremål – levereras LP5/LP5+ även med en säkerhetsbälg som täcker hela lyftområdet.

Det kan finnas olika regler gällande lyfthöjd och avskärmning beroende på lokala och nationella bestämmelser.




VI VÄGLEDER DIG – STEG FÖR STEG

Det kan vara en utmaning att navigera bland tillgänglighetslösningar, men vi finns här för att förenkla processen. Om du behöver rekommendationer för ett specifikt projekt, kan vi inspektera installationsplatsen och ge dig råd om den bästa lösningen. Vi kan hjälpa dig att säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls i ditt projekt.


Våra lyftplattformar LP5 och LP5+ är inte bara enkla att installera, utan levereras också med ett team av experter som är redo att vägleda dig varje steg på vägen. Själva installationen sköts av kvalificerade installatörer – och eftersom LP5/LP5+ inte kräver några ändringar i byggnaden, t.ex. en grop, är det en enkel och snabb process som vanligtvis tar bara en dag att genomföra.

LP5/LP5+ kräver lite underhåll eftersom tekniken är enkel och robust. Det är dock viktigt att underhålla lyftplattformen och vi rekommenderar att du ingår ett serviceavtal antingen direkt med Stepless by Guldmann eller med en certifierad Stepless-återförsäljare.




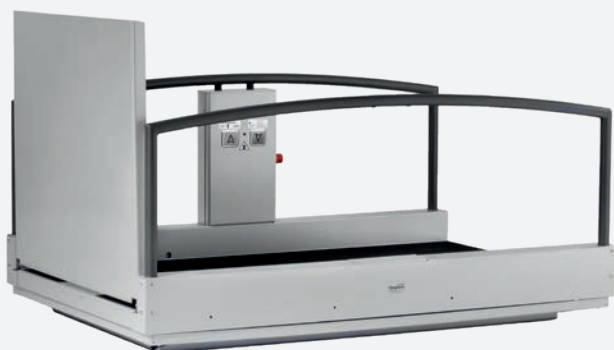


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LP5

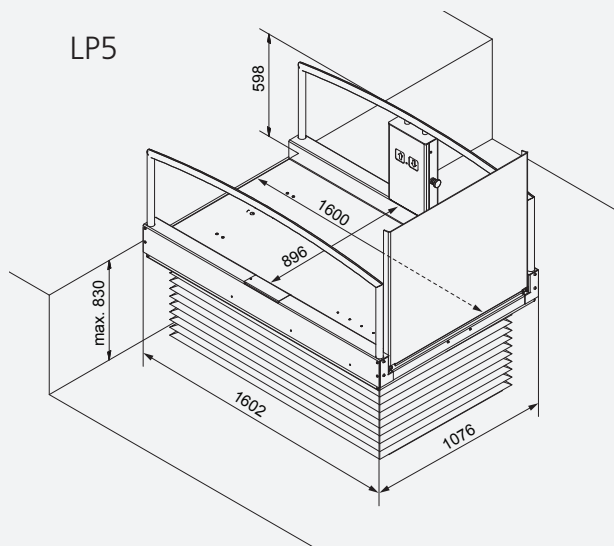

LP5+

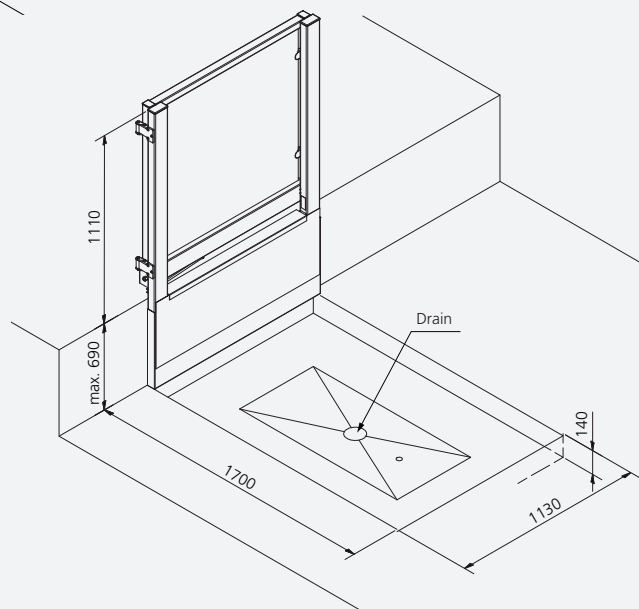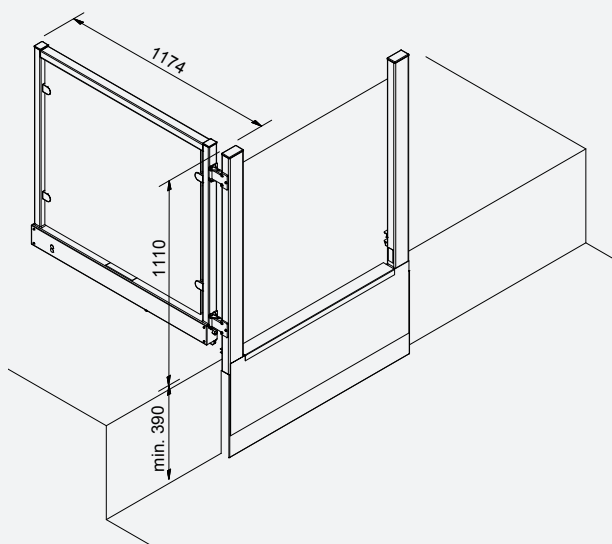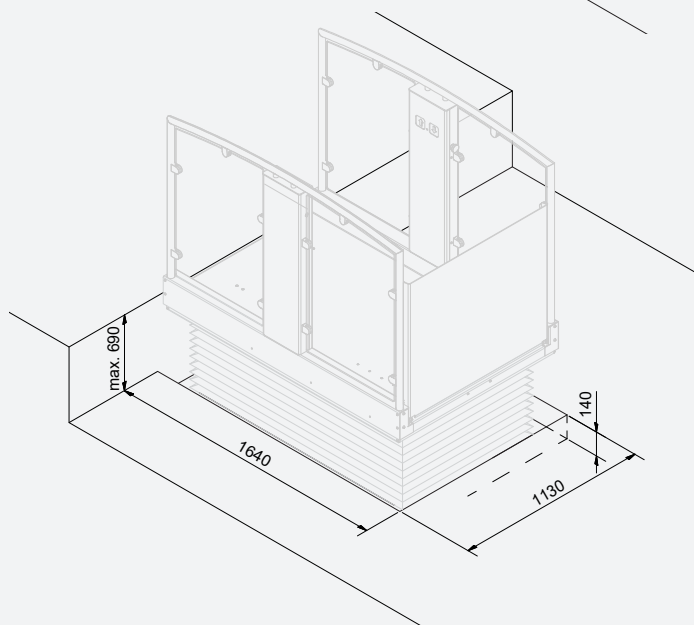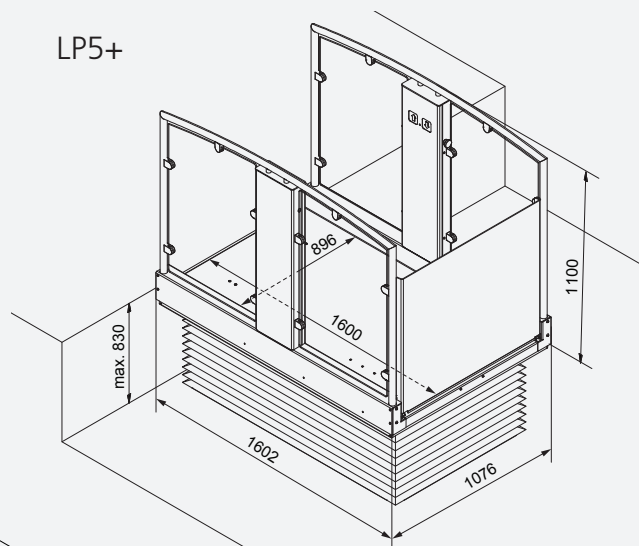

	LP5	LP5+
Funktioner		
Lyftkapacitet	360 kg	
Lyfthastighet	13 mm/sek.	
Lyfthöjd		
Min.	140 mm	
Max.	830 mm	
Betjäning		
Elektrisk	Betjäningspanel	
Nödstopp	Elektronisk	
Nödsänkning	Mekanisk	
Klämskydd	Mekanisk/elektrisk klämskyddslist	
Användning	Udendørs/indendørs	
Invändig yta	890 x 1580 mm	
Vikt		
Egenvikt	118 kg	150 kg
Säkerhetsgrind	76 kg	
Material		
Material	Aluminium	
Material	Pulverlackerat/elförzinkat stål	
Räcken	Aluminium och klar polycarbonat	
Säkerhetsgrind	Pulverlackerad stål och härdat säkerhetsglas	
Täckplatta, Säkerhetsgrind	Elförsinkad stålplatta	
Silver	RAL 9006	
Antracitgrå	Bleu 600 sablé (på räcke)	
El/elektronik		
Till/från	Automatisk	
Förbrukning		
Stand-by	3 W	
Drift	14,7 W	
Intermitens	10/90	
Säkring	T10A	
Batterier	2 x 12V/4.5 Ah Gastät och underhållsfri	
Strömförsörjning		
Primär	230 V/115 V	
Sekundär	24 V DC	
Användningsområden		
Användningsområden	-10°C - +40°C	
Inomhus och utomhus temperatur	(Vid temperaturer under fryspunkten rekommenderas att lämplig värmekälla placeras under plattan)	
Tätningsklass		
Komponenter	IP 65	
Betjäningspanel	IP 67	
Säkerhetsgrind	IP 65	
Komponenter		

	LP5	LP5+
Tillbehör/diverse		
	- Extern manöverpanel - Trådlös styrning - Säkerhetsgrind - Manuell manövrering med spiralkabel - Höger /vänster sidoavkörning	
Märkning		
	Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Rådets Direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006.	
Klassificering		
Enligt ISO 9999	18 30 06	

Varunummer/modell	
LP5	
13050-101	LP5, standard, med 800 mm ramp
13050-102	LP5, nedbyggning, med 150 mm ramp
13050-111	LP5 sidoavkörning, höger
13050-221	LP5 sidoavkörning, vänster
LP5+	
13056-101	LP5+, standard, med 800 mm ramp
13056-102	LP5+, nedbyggning, med 150 mm ramp
13056-111	LP5+ sidoavkörning, höger
13056-112	LP5+, nedbyggning med sidoavkörning, höger
13056-221	LP5+ sidoavkörning, vänster
13056-222	LP5+, nedbyggning med sidoavkörning, vänster
LP5 / LP5+	
130590	Säkerhetsgrind, helautomatisk, vänsterhängd, (sett från över plan)
130595	Säkerhetsgrind, helautomatisk, högerhängd, (sett från över plan)
1305901	Säkerhetsgrind för sidoavkörning, helautomatisk, vänsterhängd, (sett från över plan)
1305951	Säkerhetsgrind för sidoavkörning, helautomatisk, högerhängd, (sett från över plan)

Plattform monteras med minst 100 mm avstånd till vägg för att minimera klämrisk.

