



Trainer Module

Taklyft med dynamisk viktavlastning

En GH3+-lyft utrustad med Trainer Module är inte bara en perfekt lyft och förflyttningslösning. Den ger dig också möjligheten att erbjuda patienten dynamisk viktavlastning och ökad mobilitet som utförs genom säker och assisterad träning, funktionella förflyttningar och stående. Mobiliseringen kan starta i tidigare skede, redan i patientens rum.

Med Trainer Module erbjuder GH3+ dynamiskt stöd av patientens vikt och patientens kroppsvikt kan avlastas med upp till 100 kg.


När lyften är fulladdad har Trainer Module en kontinuerlig användningskapacitet på upp till 30 minuter. Efter 30 minuter växlar Trainer Module automatiskt från träningsläge till förflyttningsläge.

Trainer Module aktiveras, styrs och övervakas med hjälp av med hjälp av manöverdosan. Valt funktionsläge visas tydligt och när enheten befinner sig i träningsläge visas viktavlastningsnivån och återstående tränings tid på LCD-skärmen.

I förflyttningsläge är GH3 omedelbart klar för lyft och förflyttning och laddningen fortsätter automatiskt.



Transfer Treatment Training

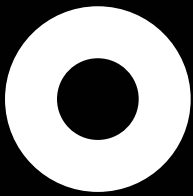

Ett system
– många valmöjligheter

Med Trainer Module erbjuder Guldmann taklyft ännu en användningsmöjlighet, utöver lyft upp och ned.

Med Trainer Module kan patienten mycket tidigare, redan i patientens rum, börja med mobilisering med dynamisk viktavlastning.

Handsfree
– så att du kan fokusera på träningens kvalitet

Rutinmässiga funktionella aktiviteter med dynamisk viktavlastning:

- Förvandlar säng till stol eller kommod
- Balansträning i stående ställning
- Steg
- Stående träning såsom viktfordelning, stående på ett ben
- Mjuka knäböjningar
- Aktivt rörelseomfång

Vanliga rehabiliteringsövningar med dynamisk viktavlastning:

- Trappor och trappsteg
- Gångträning
- Balans
- Sittande till stående
- Knäböj och utfallssteg
- Aktivt rörelseomfång

En unik lösning
– enkel och flexibel

- Viktavlastning på upp till 100 kg i steg om 1 kg
- Träningssessioner på upp till 30 minuter
- Fallskydd
- Lätt att använda och övervaka
- När lyftmodulen inte används för träning fungerar den som en vanlig lyft
- Laddning i 1 timme = träning i 10 minuter



Patentansökt

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se