




V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

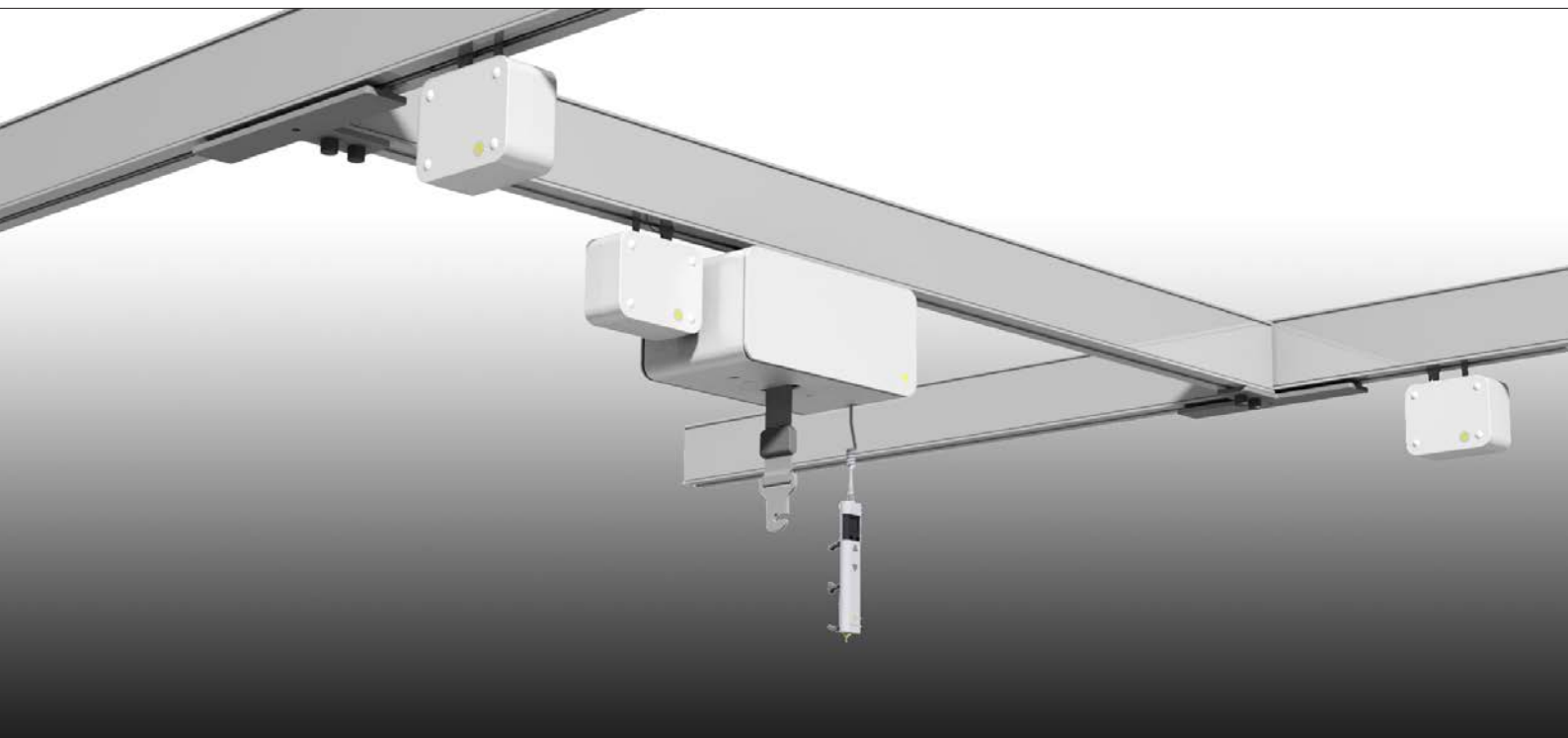

Positionslås

Positionslås føjer endnu en funktion til de mange anvendelsesmuligheder, som Guldmann loftliften byder på ud over at løfte op og ned.

Med **Positionslås** er det muligt at fastgøre løftemodulet og/eller traversskinnen i en bestemt position i rummet, som skinneresystemet er anbragt i.

Positionslås består af tre små låse – én anbragt i forbindelse med loftliften i traversskinnen – de øvrige to i hver af de parallelle skinner.

Ét system – masser af muligheder

- Når du aktiverer låsene i de parallelle skinner, kan du fastlåse traversskinnens sideværts bevægelse. Det betyder, at traversskinnen kommer til at fungere som en fast enkeltskinne. Løftemodulet kan fortsat bevæges fremad i traversskinnen, hvorved eventuel gangtræning med systemet lettes.
- Hvis du kun aktiverer låsen, der er forbundet med løftemodulet, kan du bevæge traversskinnen, uden at løftemodulet bevæger sig sidelæns.
- Ved aktivering af alle tre låse kan du fastgøre løftemodulet fuldstændigt i en bestemt position, f.eks. i forbindelse med genoptræningsøvelser i sengen.

Fastgørelsen gør det muligt at bruge løftemodulet til rehabiliterings- og genoptræningsformål med både sengeliggende patienter og ambulante patienter.

Nem at bruge

Positionslås betjenes via en IR-sender, og du behøver bare at trykke på en enkelt knap for at indstille den ønskede konfiguration. Når systemet skal nulstilles og bruges til løfte- og forflytningsopgaver, trykker du på nulstillingsknappen, hvorefter låsene frigives.

| Time to care |

Transfer
Treatment
Training