

GH1

GH1 Q, GH1 F

Guldmann™

Taklyftarna GH1



Taklyft för långsiktig vård

Taklyftssystemet GH1 är konstruerat för att uppfylla alla vardagliga lyftbehov både i hem- och vårdmiljöer. Den kräver väldigt lite utrymme, och är mycket enkel att använda tillsammans med Guldmanns heltäckande sortiment med lyftselar och andra tillbehör. GH1 lyftmodul finns också i GH1 Q version med snabbkoppling som gör det mycket enkelt att sätta i eller ta ur lyftmodulen från skenorna, GH1 och GH1 Q kan monteras i nästan alla typer av skenor.

Hög kvalitet och stor bekvämlighet för alla lyft

GH1 kombinerar behovet av största möjliga bekvämlighet och effektiva och säkra arbetsrutiner. För en vårdgivare handlar detta om en bättre arbetsmiljö där inga onödiga manuella lyft eller påfrestningar förekommer – och för användaren gäller det ökad bekvämlighet, men framför allt lyftrutiner som erbjuder både trygghet och värdighet.

Enkelt att använda

Precis som GH3-systemet innebär GH1-systemet att vårdpersonalen kan lyfta och flytta användarna utan att riskera sina ryggar. Taklyften GH1 klarar av att snabbt och säkert lyfta användare som väger upp till 205 kg, och den styrs med ett ergonomiskt och lättanvänt handreglage. Snabbare lyft ger mer tid till det som är viktigast, vård och omsorg.

Snabb uppladdning

Den snabba uppladdningen av GH1 startar så snart handreglaget placeras i laddningsdockan. Laddning tar normalt endast 2-3 timmar. En fullt uppladdad lyftmodul klarar mer än 55 lyft på 85 kg.

Snabbkoppling

GH1 Q lyftmodul har ett snabbkoppling system som gör det mycket enkelt att sätta i eller ta ur lyftmodulen från skenorna, när det är önskvärt att flytta lyften till ett annat rum eller bostad. Inga som helst verktyg behövs för att flytta lyftmodulen.



GH1 Q
– med snabbkoppling



Taklyftarna GH1



Design som smälter in

Både själva taklyften GH1 och dess skensystem är enkla att dekorera så att de matchar eller smälter in i den miljö där de används. GH1 levereras som standard med fyra olika sidoskydd att välja mellan.

Flera skenor – större möjligheter

I taklyftsystemet GH1 ingår tre olika typer av skenor, som är specialkonstruerade för specifika distanser och vikter. Skenor kan enkelt byggas in i såväl tak som väggar, och kan anpassas efter den befintliga inredningen med hjälp av lättmonterade sidoskydd i flera olika färger. Det går snabbt och lätt att byta dessa sidoskydd, vilket gör att skensystemet alltid kan se fräscht och nymålat ut när en ny boende flyttar in i rummet.

Förutom de skenor som kan monteras på väggar och i tak finns även ett fristående skensystem. Dessa skenor kan enkelt justeras i både höjd- och breddled, vilket gör dem idealiska för tillfälliga behov av lyfthjälpmiddel. Hela skensystemet kan monteras av 1-2 personer, och inga verktyg behövs. Systemet kan göras klart för användning – och plockas ihop igen – på bara 10 minuter.

GH1 kan monteras i nästan alla typer av skenor





Taklyftarna GH1

Säker och tillförlitlig

Taklyften GH1 uppfyller alla relevanta standarder och är ytterst säker och tillförlitlig att använda.

GH1 har väldigt mycket gemensamt med den prisbelönta taklyften GH3, som har installerats på många av världens mest respekterade sjukhus. Taklyftssystemet GH1 utnyttjar den innovativa och robusta GH3-tekniken till fullo, och detsamma gäller design, funktion och kostnadseffektivitet.

GH1 – taklyft

Användarvänlig, kraftfull och snabb lyftmodul för permanent installation och för installation i fristående skensystem.

- Hög lyftkapacitet – upp till 205 kg
- Hög lyfthastighet – 40 mm per sekund vid full belastning
- Hanteras via ett intuitivt och lättanvänt handreglage
- I allra högsta grad återvinningsbar
- Fantastiskt enkel att rengöra
- GH1 Q snabbkoppling system som gör det mycket enkelt att att flytta lyften till ett annat rum eller bostad.

GH1 – en taklyft som klarar det mesta

Fristående skensystem



GH1 F – den flexibla taklyften



GH1 F är en flexibel lyftmodul som enkelt kan flyttas mellan olika rum med hjälp av den tillhörande transport- och förvaringsvagnen. GH1 F kopplas automatiskt till och från skensystemet, och därigenom slipper personalen alla de lyft och påfrestande rörelser som annars kan krävas för att flytta och installera modulen.

GH1 F innebär att det är fullt möjligt att installera skenor i valfritt antal rum och sedan nöja sig med ett fåtal lyftmoduler som snabbt och enkelt kan flyttas mellan rummen när de behövs.



Trolley 255 kg
max 255 kg
Guldmann

Guldmann

Bestraum
max 255 kg

GH1 F – den flexibla taklyften



Specialkonstruerad transport- och förvaringsvagn där lyftmodul, lyftbygel och sele får plats.

Flexibel, effektiv och säker

Så snart GH1 F har installerats får du tillgång till exakt samma funktioner som GH1-lyftmodulen erbjuder – och jämfört med traditionella portabla lyftar innebär det också att du kan dra nytta av samma fördelar som en fast monterad taklyft ger:

- Lyfthöjden begränsas inte av personalens räckvidd.
- Användaren slipper att hänga så långt ned, utan kan lyftas direkt från t.ex. en stol till sängen, men även från golvnivå.
- Hög lyftkapacitet – upp till 205 kg.
- Användarens huvud kommer aldrig i kontakt med lyftmodulen.
- Många olika löstagbara lyftselar finns att välja på – du hittar enkelt en som passar dina behov


GH1 F – en flexibel taklyft med automatisk installation

GH1, GH1 Q och GH1 F ingår i Guldmanns kompletta sortiment med lyfthjälpmiddel där skenor, takhissar, lyftselar och andra tillbehör finns att tillgå – samtliga av modulkonstruktion så att de passar perfekt ihop. Modulerna kan kombineras på många olika sätt och kan installeras praktiskt taget överallt.



Lyftmodulen kopplas till/från skensystemet helt automatiskt – personalen behöver inte utföra några olämpliga lyft eller rörelser.



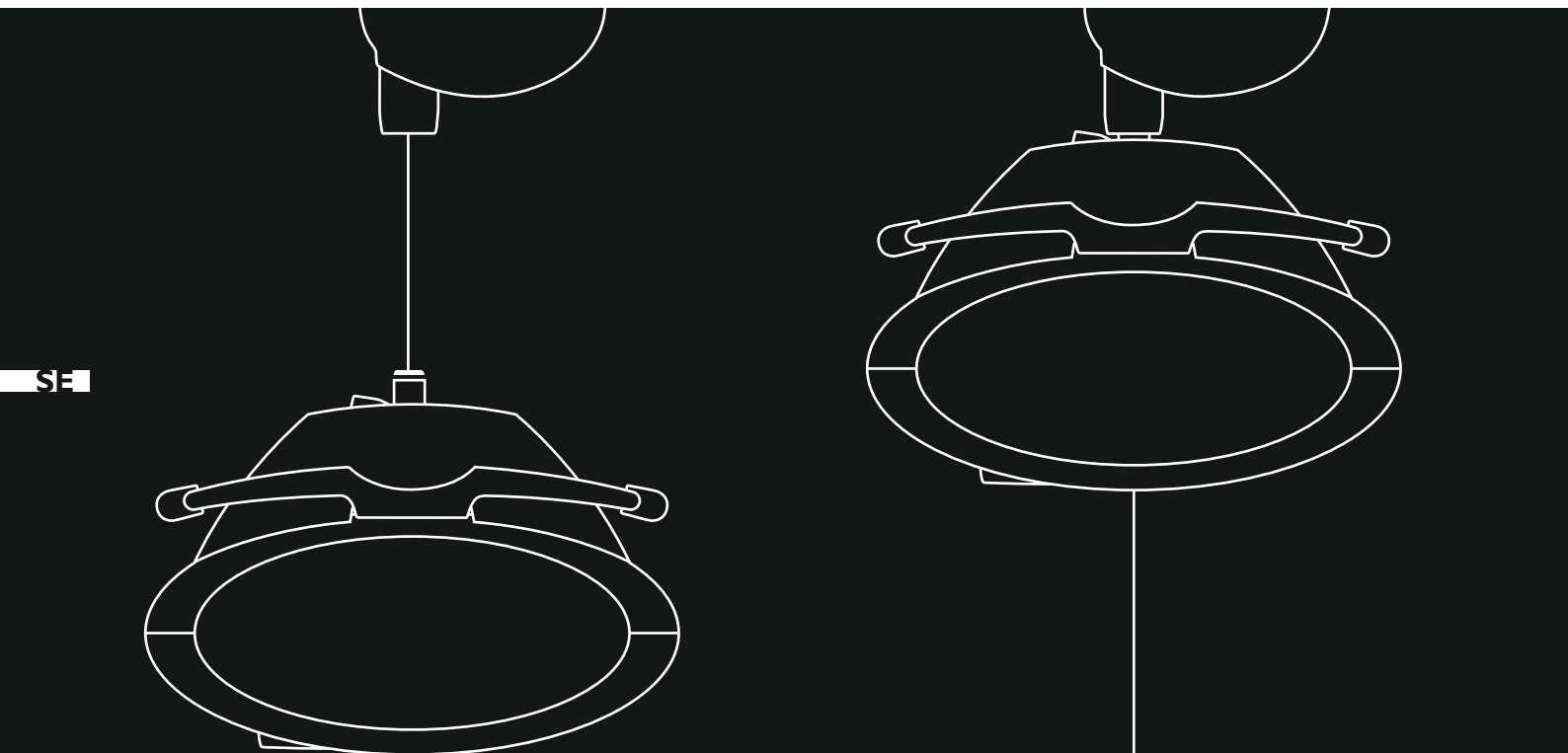

| Time to care |

V. Guldmann A/S

Hovedkontor:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB

Smålandsgatan 4
S-441 57 Alingsås
Tel. +46 0322 55290
Fax +46 0322 55320
info@guldmann.se
www.guldmann.se