



GHZ Lyftmotor Tekniska specifikationer

Vikt och material


Maxvikt	: 255 kg
Egenvikt	: 8 kg

Hölje : Stöttålig UL 94 V-0 flame återvinningsbar plast

Mått

A	: 450 mm
B	: 172 mm
C	: 254 mm
D	: 2.500 mm

Djup lyft : 155 mm

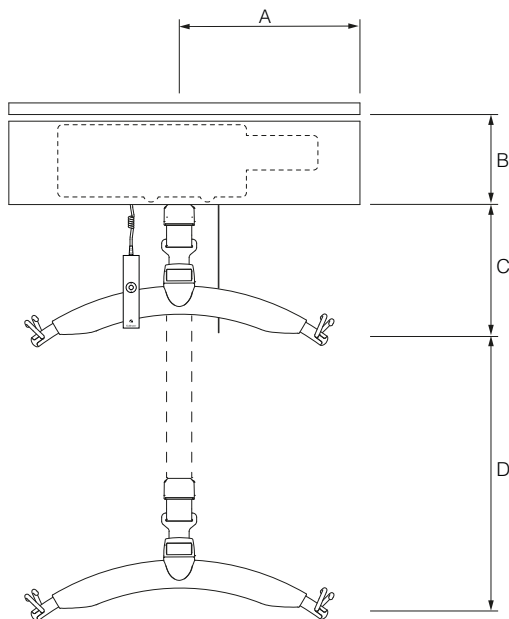

Funktioner

Manövrering	: Handkontroll / IR
Ljudnivå	: 63 dB (A)

Säkerhet

Nödstopp	: Ja
Nödsänkning	: Ja, elektrisk
Kontroll av lyftband	: Ja
Brytvinkel vid sneddragnig:	: 45° på tvären 10° på längden

Elektriska specifikationer

On/off	: Automatiskt vid användning. Mjuk start/stopp Skydd mot överladdning.
Batteri	: 1 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Max laddningstid	: 3 timmar
Batteriskydd	: Vid batterispänning under 22 V blir indikatorlampan orange. Lyften stannar om spänningen faller under 20 V
Strömförsörjning Matningsspänning, strömförsörjning	: 36V DC, 30W 100/240V AC, 47-63 Hz

Tätningssklass (IP) enligt IEC 60529

Lyft motor	: IP 20
Handkontroll	: IP 44
Dockningsstation	: IP 20
Strömförsörjning	: IP 20

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Klassifikation

Följande ISO 9999

Patent : PA 2006 00632

| Time to care |



GHZ Lyftmotor Tekniska specifikationer

GH lyftmoduler konfiguration			Tillval													
Guldmann lyftmodell	Lyfthastighet, mm/s (Normal/Turbo)	Max lyftkapacitet	Wi-Fi	Dataöverföring - visas på MyGuldmann	Handkontroll med display	Function on demand	Våg	Klass III våg	Träningsmodul	Coating	UL	Fast skenladdning	Laddning i dockningsstation	Positioneringslås	IR fjärrkontroll ^{x)}	Horisontella drivmotorer ^{x)}
GHZ	40	255								•			✓			

- *Tillval*
- ✓ *Ingår alltid*
- x) *Inte kompatibel med UL*

		GHZ
Lyfthastighet		
85 kg vikt		40 mm/sek.
150 kg vikt		40 mm/sek.
Max viktkapacitet		40 mm/sek.
Max 5 kg vikt		40 mm/sek.

Antal lyft och Intermittens

Max. antal lyft i serie : 55 med 85 kg/1000 mm
 Laddningstid : 3 timmar
 Intermittens : 4 min. ON/16 min. OFF

SWL : 255 kg
 Max. antal lyft i serie : 21/1000 mm
 Laddningstid : 3 timmar
 Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF