



GTP1

Plateforme de transfert GTP1

Transfert facile, confortable et sûr en position debout

La solution Plateforme de transfert GTP1 de Guldmann est un outil de travail manuel mobile qui facilite le déplacement des utilisateurs capables de se tenir debout et semi-autonomes.

En participant activement au transfert, l'utilisateur peut solliciter et entraîner sa propre fonction musculaire et son propre équilibre. Robuste et stable, cette solution assure un degré de soutien et de sécurité élevé pendant les transferts courts en position debout. Si nécessaire, une ceinture de transfert peut être utilisée pour un soutien supplémentaire pendant le transfert en position debout.

Les tâches de transfert et de manutention typiques à l'aide de la plateforme de transfert incluent :

- Transfert vers et depuis les toilettes/une chaise percée
- Transfert vers et depuis une chaise de douche
- Entraînement pour se lever/s'asseoir (mobilisation)
- Maintien d'une position debout (mobilisation)

Simple et fiable à manœuvrer

La plateforme de transfert est facile à déplacer et demande très peu d'espace. Elle peut être poussée, tirée et tournée. Elle est ainsi très facile à manœuvrer, même dans un espace limité.

Flexible et efficace

La plateforme de transfert de Guldmann peut être utilisée dans tous les environnements de soins de santé et assure un transfert actif et sûr de l'utilisateur et un environnement de travail sûr et ergonomique pour le soignant. Ce dispositif est facile à transporter d'un endroit à un autre, comme par exemple pour les soins à domicile, les sections supérieures et inférieures peuvent être facilement séparées et transportées en deux parties.

Capacité de poids max. de 175 kg.



Details du produit




Poignée multiprise

La poignée, dotée d'une surface douce et antidérapante, est conçue de manière ergonomique avec des prises incurvées sur trois niveaux. Cette conception permet à l'utilisateur et au soignant de choisir le meilleur endroit pour se tenir, et les trois prises peuvent être utilisées comme une « échelle » lorsque l'utilisateur se lève ou s'assoit.



Faible hauteur d'accès

La plaque de base est fabriquée en aluminium moulé avec une surface antidérapante. La hauteur d'accès de seulement 30 mm et la forme permettent un positionnement plus proche d'un fauteuil roulant ou de toilettes, par exemple. La faible hauteur d'accès permet à l'utilisateur de relever facilement ses pieds sur la plaque de base.

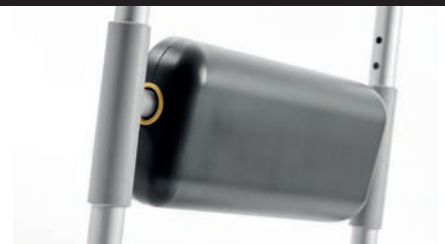

Support de jambe inférieur réglable

Le support de jambe inférieur réglable est doté d'un rembourrage doux qui offre un bon soutien ainsi qu'un niveau de confort accru pour l'utilisateur. Pour obtenir un soutien maximal, le support de jambe inférieur peut être facilement et rapidement ajusté à l'aide de la fonction de préhension facile.



Frein central

La pédale de frein est positionnée au centre et bloque les deux roues simultanément. Le frein comporte un code couleur permettant d'indiquer clairement s'il est enclenché ou non.



Ceinture de transfert

Pour plus de soutien et de sécurité pendant le transfert, la ceinture est placée autour du haut du corps de l'utilisateur et fixée à la prise centrale de la poignée de la plateforme de transfert. REMARQUE : la ceinture de transfert ne doit pas être utilisée pour mettre l'utilisateur en position debout.



Préparation à des fins de recyclage

Grâce à ses surfaces lisses et à sa construction solide, la solution plateforme de transfert est facile à nettoyer et adaptée au recyclage. La Plateforme de transfert est conçue de sorte que ses matériaux puissent être facilement séparés et recyclés en fin de vie.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
france@guldmann.com
www.guldmann.fr