



Modules de levage GH1/GH1+ Spécifications techniques

Poids et matériaux

SWL	: 175 kg, 205 kg, 255 kg
Poids propre	: 8,0 kg

Capot : Matière plastique résistant aux chocs, ignifugée et recyclable UL 94 VO

Dimensions

A	: 580 mm
B	: 353 mm
C	: 161 mm
D	: 185 mm
E, min.	: 416 mm
F	: 2500 mm
Profondeur	: 200 mm

Fonctions

Contrôle	: Télécommande
Niveau sonore	: 52 dB (A)

Sécurité

Arrêt d'urgence	: Oui
Descente d'urgence	: Oui, électrique
Sangle de levage	: Oui
Angle d'interruption	: Env. 45° dans le sens de la longueur du rail Env. 10° dans le sens diagonal du rail

Parties électriques

Marche/arrêt	: Automatique. Départ/arrêt progressifs. Protégé contre les surcharges.
Batterie	: 1 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Temps de charge, max.	: 3 heures

Protection des batteries : Quand la tension atteint moins de 22 V, le voyant devient jaune. Et à moins de 20 V, le lève-personne s'arrêtera.

Tension secteur	: 36 V DC, 30W
Tension d'alimentation du alimentation électrique	: 100-240V AC, 47-63 Hz

Classe de protection (IP) en conformité avec IEC 60529

Module de levage	: IP 44
Télécommande	: IP 44
Station de charge	: IP 20
Alimentation électrique	: IP 20

Marquage


Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Classification

Suivant à ISO 9999

Brevets

: PA 2008 00888
: PA 2008 00894
: PA 2008 00895

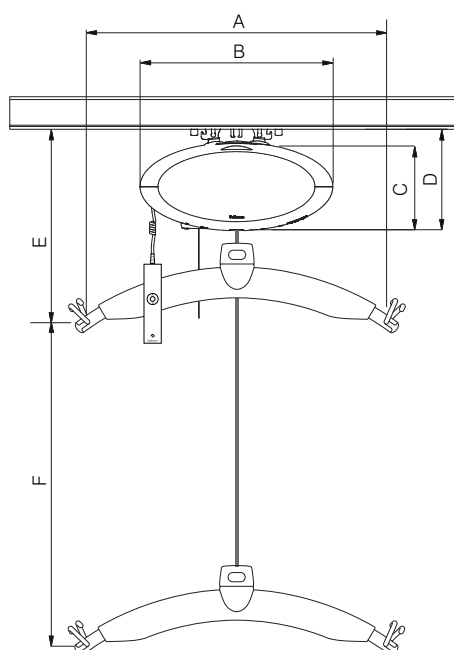



Modules de levage GH1/GH1+ Spécifications techniques

Configurations des modules de levage GH			Options													
Type de lève-personne Guldmann	Vitesse de levage, mm/s (Normal / Turbo)	Charge en kg	Connexion Wi-Fi	Transmission des données visible sur MyGuldmann	Télécommande avec écran	Fonction à la demande	Balance	Balance classe III	Trainer	Revêtement	UL	Charge automatique	Charge dans la station d'accueil	Verrouillage de positionnement	Télécommande infra-rouge ^{x)}	Moteurs de translation horizontale ^{x)}
GH1	40/80	175								•			✓			
		205								•			✓			
		255								•			✓			
GH1+		175	✓	✓						•			✓			
		205	✓	✓						•			✓			
		255	✓	✓						•			✓			

• *Optionnel*

✓ *Toujours inclus*

x) *Non compatible avec UL*

Vitesse de levage

avec une charge de 85 kg : 40 mm/sec.
avec une charge de 150 kg : 40 mm/sec.
Capacité de levage max., SWL : 40 mm/sec.
avec une charge de 5 kg max. : 40/80 mm/sec.

Nombre de levages et intermittence (fonctionnement/arrêt)

Nombre de levages en séries, max. : 55 avec 85 kg/1000 mm
Temps de charge : 3 heures
Mise en veille : 4 min. ON / 16 min. OFF

Nombre de levages en séries, max. : 39 avec 175 kg/1000 mm
32 avec 205 kg/1000 mm
21 avec 255 kg/1000 mm

Temps de charge : 3 heures
Mise en veille : 2 min. ON / 18 min. OFF