


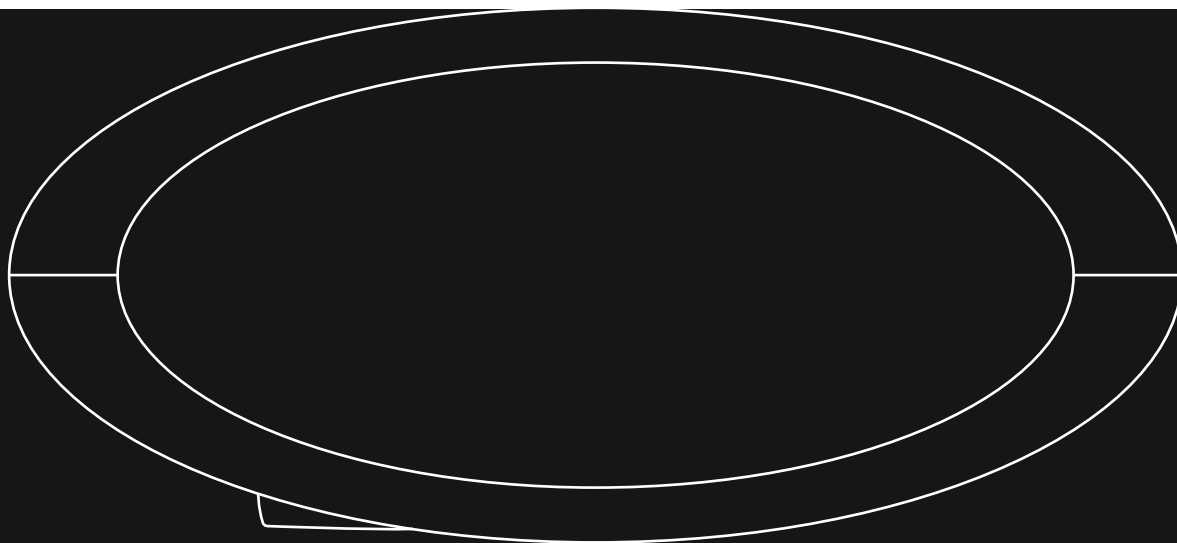

GH1

GH1 Q, GH1 F

Guldmann™

GH1 Deckenlifter



GH1 Q
– Schnellverschluss Version

Deckenlifter für die Langzeitpflege

Der GH1 Deckenlifter wurde speziell für die in der häuslichen Pflege oder in Pflegeeinrichtungen anfallenden alltäglichen Hebevorgänge entwickelt. Er benötigt wenig Platz, ist mit allen Hebesitzen und Hebezubehörprodukten von Guldmann einfach und problemlos kombinierbar. Das GH1 Hebemodul gibt es auch als Version GH1 Q mit einem speziellen Klick-Verschluss, der schnelles Ein- und Aushängen erlaubt. Sowohl der GH1 als auch der GH1 Q kann in fast allen Schienensystemen montiert werden.

Hohe Hebequalität, viel Komfort und einfache Handhabung

Der GH1 vereint größtmöglichen Komfort mit effektiven Arbeitsabläufen und sicheren Hebevorgängen. Für den Pflegenden bedeutet dies, dass Hebe- und Transfervorgänge rücken schonend durchgeführt werden können. Manuelles Heben oder andere unzweckmäßige Belastungen entfallen.

Mit dem GH1 können Personen bis zu einem Körpergewicht von 205 kg zügig und sicher gehoben und bewegt werden. Schnelleres Heben schafft mehr Zeit für die eigentlichen Pflegeaufgaben.

Schnelles Aufladen

Zum raschen Aufladen des Hebemoduls wird die Handbedienung einfach in die GH1 Ladestation gegeben. Der Ladevorgang dauert in der Regel 2-3 Stunden und mit einem vollständig aufgeladenen Hebemodul können mehr als 55 Hebevorgänge von je 85 kg durchgeführt werden.

Modell GH1 Q für schnelles Ein- und Aushängen

Das GH1 Q Hebemodul hat ein Schnellverschluss-System, mit dem sich das Hebemodul im Handumdrehen in die Schienen einhängen und wieder aushängen lässt. Dies könnte von Zeit zu Zeit erforderlich sein, wenn das Hebemodul in einen anderen Raum oder zu einem anderen Standort verlegt werden muss. Der Vorgang lässt sich ohne Werkzeug ausführen.



GH1 Deckenlifter



Design, das sich anpasst

Sowohl das GH1 Hebemodul als auch die Schienen lassen sich individuell dekorieren, so dass sie sich optisch gut an jede Umgebung anpassen. Das GH1 Hebemodul wird standardmäßig mit vier verschiedenen Abdeckungen geliefert.

Mehr Schienen – mehr Möglichkeiten

Die Schienen für den GH1 Deckenlifter gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, wobei jede für bestimmte Spannweiten und Traglasten entwickelt wurde. Sie können leicht in Decke und Wände integriert und durch Einklicken farbiger Abdeckungen individuell an die Umgebung angepasst werden. Da sie sich schnell und einfach auswechseln lassen, erscheint das Schienensystem stets in einem gepflegten Zustand, wann immer ein neuer Bewohner in das Zimmer einzieht.

Zusätzlich zum Schienensystem, das an Decken und/oder Wände montiert wird, gibt es den GH1 auch mit einem freistehenden Schienensystem, das bequem in Höhe und Breite einstellbar ist. Es kann von ein bis zwei Personen innerhalb von zehn Minuten ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden und ist somit ideal bei sofort erforderlicher Hebeleistung.

GH1 Hebemodule können in fast allen Schienenarten montiert werden





GH1 Deckenlifter

Sicher und zuverlässig

Das GH1 Deckenliftsystem erfüllt alle relevanten Normen und ist besonders sicher und zuverlässig in der Anwendung.

Der GH1 basiert in weiten Teilen auf der gleichen Bauweise wie der preisgekrönte GH3 Deckenlifter, der schon in vielen namhaften Kliniken weltweit installiert worden ist. Das GH1 Hebe-
modul ist umfassend mit der innovativen und robusten Technologie des GH3 Deckenliftsystems ausgestattet und verfügt darüber hinaus auch über dessen, Funktionalität und Kostenersparnis.


GH1 – Deckenlifter

Ein benutzerfreundliches, leistungsstarkes und schnelles Hebemodul, für die dauerhafte Installation und für die Installation in einem freistehenden Schienensystem.

- Große Hebeleistung – bis zu 205 kg
- Hohe Hebegeschwindigkeit – 40 mm pro Sekunde bei maximaler Traglast
- Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Handsteuerung
- Recyclbar
- Besonders leicht zu reinigen
- GH1 Q – Das Schnellverschluss System (Klick-System) macht das Verlegen des Hebemoduls in einen anderen Raum besonders einfach

GH1 – ein Deckenliftsystem, das höchsten Ansprüchen genügt

*Freistehendes
Schienensystem*

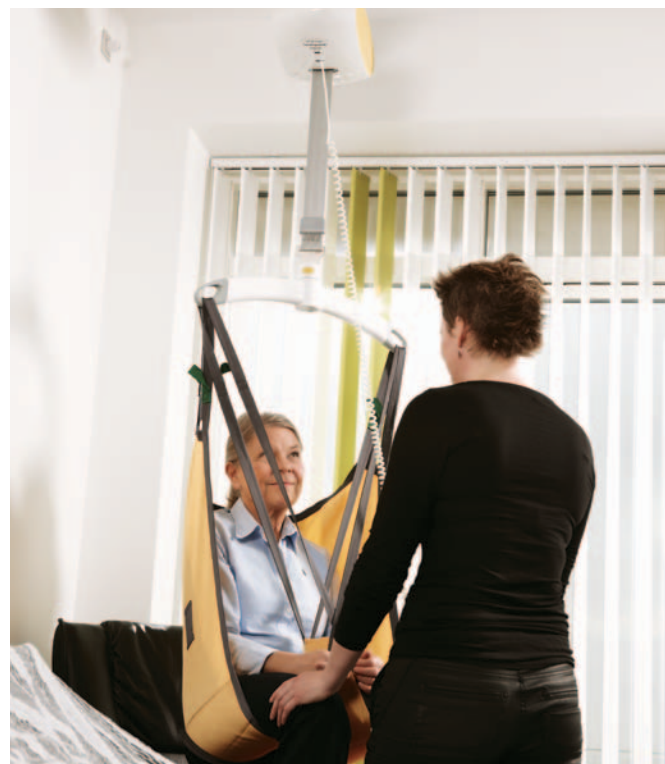

GH1 F – das flexible Deckenliftsystem



Das GH1 F – ist ein mobiles Hebe-
modul, das leicht mithilfe des
dazugehörigen Transport- und
Aufbewahrungswagens von einem
Raum zum anderen verlegt werden
kann. Es montiert bzw. demontiert
sich automatisch im Schienensystem,
so dass das Personal weder beim
Transport noch beim Anbringen des
Moduls körperlichen Belastungen
ausgesetzt ist.

Mit dem GH1 F ist es möglich meh-
rere oder alle Räume mit Schienen
auszustatten und sich dabei auf
wenige Hebemodule zu beschränken,
da sie im Rahmen der täglichen
Pflege mühelos von einem Zimmer
zum nächsten verlegt werden können.



Trolley
max 255 kg
Guldmann

Guldmann

Bestandteil
max 12 kg
Guldmann

GH1 F – das flexible Deckenliftsystem



Speziell entwickelter Transport- und Aufbewahrungswagen mit Platz für Hebemodul, Hebebügel und Hebesitz

Flexibel, effizient und sicher

Nach der selbständigen Installation verfügt der GH1 F über exakt die gleichen Funktionen wie das GH1 Hebemodul – und im Unterschied zu herkömmlichen mobilen Liftsystemen liefert der GH1 F dieselben Vorteile wie ein fest montierter Deckenlift:

- Hubhöhe ist nicht auf die Reichweite des Pflegepersonals begrenzt
- Der Benutzer hängt immer in der richtigen Höhe, um direkt von einem Stuhl oder vom Boden aus ins Bett gehoben zu werden.
- Große Hebeleistung – bis zu 205 kg
- Viel Kopffreiheit für den Benutzer
- Große Auswahl an Hebezubehör


GH1 F – ein mobiler Deckenlifter mit Selbstmontage

Der GH1, GH1 Q und GH1 F sind Teil des gesamten Spektrums an Guldmann Hebeprodukten einschließlich Schienen, Deckenliftern, Hebesitzen und -zubehör – all diese Produkte wurden als Module entwickelt und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Sie lassen sich auf viele verschiedene Arten miteinander kombinieren und können nahezu überall installiert werden.



Das Hebemodul montiert bzw. demontiert sich automatisch im Schienensystem und verhindert somit unnötige Belastungen des Personals.



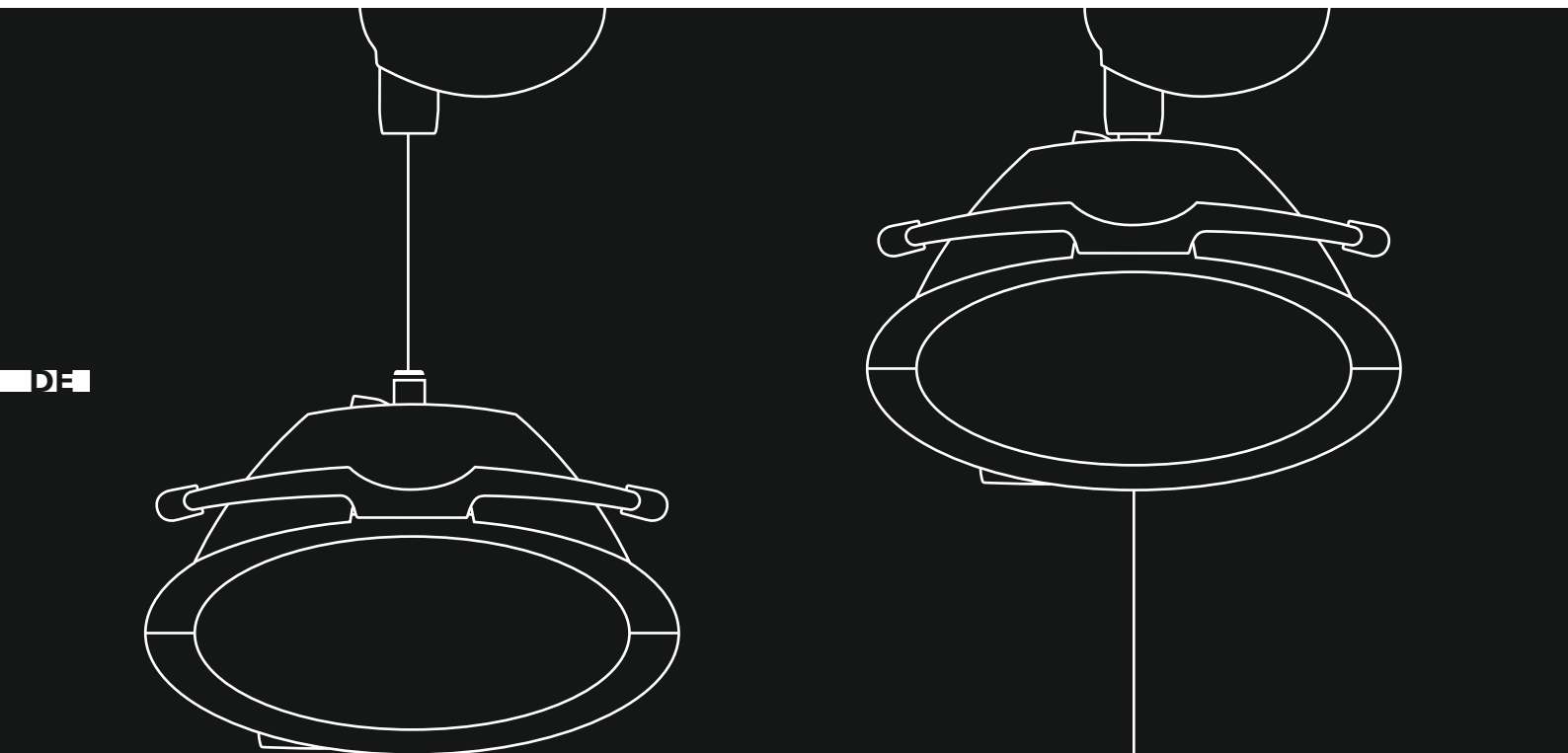

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Hauptsitz:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Unter den Eichen 5
D-65195 Wiesbaden
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de