



# Trainer Modul

## Takheis med dynamisk kroppsvektstøtte

***En GH3+-heis utstyrt med Trainer Modul er ikke bare en perfekt løsning for løft og forflytning fra ett sted til et annet. Den gjør det også mulig å tilby pasienter dynamisk bevegelighetsstøtte gjennom trygg og assistert trening, funksjonelle forflytninger, å stå oppreist samt noe bevegelse i rommet deres.***

I Trainer Modul-modus gir GH3+ dynamisk støtte av pasientens vekt, og pasientens kroppsvekt kan avlastes med opptil 100 kg.


Trainer Modul har en kapasitet på opptil 30 minutters kontinuerlig bruk når heisen er fulladet. Etter 30 minutter går Trainer Modul automatisk over fra treningsmodus til forflytningsmodus.

Training Module startes, kontrolleres og overvåkes via digital håndbetjening. Den valgte funksjonsmodusen vises tydelig, og i treningsmodus viser LCD-skjermen hvor mye vekt som avlastes, samt hvor lang tid det er igjen av treningen.

I forflytningsmodus er GH3+ umiddelbart klar for løfting og bevegelse, og lading vil fortsette som normalt.



# Transfer Treatment Training

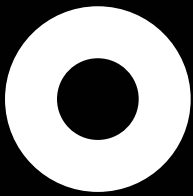

Ett system  
– mange muligheter

Trainer Modul er enda et alternativ til de mange bruksområdene Guldmann-takheisen tilbyr i tillegg til å løfte opp og ned.

Med Trainer Modul er det mulig å starte bevegelsesaktiviteter mye tidligere, med dynamisk vektavlastning allerede på pasientens rom.

Håndfri  
– slik at fokuset blir på treningskvaliteten

**Rutinemessige aktiviteter for økt funksjonell bevegelse med dynamisk vektavlastning:**

- Forflytning fra seng til stol eller toalett
- Stående balanse
- Skritt
- Stående øvelse som vektoverføring og å stå på ett bein
- Forsiktige knebøy
- Aktivt bevegelsesområde

**Vanlige rehabiliteringsøvelser med dynamisk vektavlastning:**

- Trapper og trinn
- Gåtrening
- Balanse
- Sittende til stående
- Knebøy og utfall

En unik løsning  
– enkel og fleksibel

- Vektavlastning på opptil 100 kg i trinn på 1 kg
- Treningsøkter på opptil 30 minutter
- Fallforebygging
- Enkel å bruke og å overvåke
- Løftemodul som fungerer som en normal heis når den ikke brukes til trening
- 1 times lading = 10 minutter trening



| Time to care |

V. Guldmann A/S  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann Norge  
Tel. +47 40 000 564  
norge@guldmann.com  
www.guldmann.no