



Découvrez les **Smart Loops** de Guldmann !

Brevet en instance

Technologie Smart Loop

Le recours à des techniques de tissage modernes pour produire la sangle de harnais «Smart Loops» donne un produit plus homogène et encore plus solide. La sangle et les boucles sont faites d'une seule pièce, ce qui améliore la résistance.

Facilité d'utilisation

- Une conception simplifiée, avec sangle tissée et boucles reliée à un seul tenant. Cela permet de manipuler la sangle en toute sécurité, même d'une seule main.
- Un code couleur, clair et visible sous tous les angles, ce qui offre une bonne fixation du harnais sur le cintre de levage.
- Une épaisseur moindre : lors de la mise en place et du retrait des sangles du harnais, le risque de cisaillement de la peau est considérablement réduit. Elle dispose éga-

lement d'un profil compact qui applique moins de pression si la sangle se retrouve sous le tissu par erreur

Un coût réduit et plus de facilité de rangement

- Moins de matériaux et un poids réduit
- (1 kg pour 10 harnais, soit 7 % d'un harnais de repositionnement) donc des coûts de nettoyage et de transport pour le cycle de lessive réduits.
- Amélioration du profil plié, prend moins de place pour le rangement


Sécurité d'utilisation

- Réduit le risque d'emmêlement involontaire dans l'environnement immédiat (fauteuil roulant, lit, etc.), car les boucles sont parfaitement intégrées dans la sangle
- Réduit le risque de trébuchement car les boucles non utilisées constituent une sangle de harnais rectiligne
- Facile à ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée



Sangle Smart Loops
Boucles et sangle tissées
en une seule pièce

Sangle standard
cousue sur la sangle à boucles

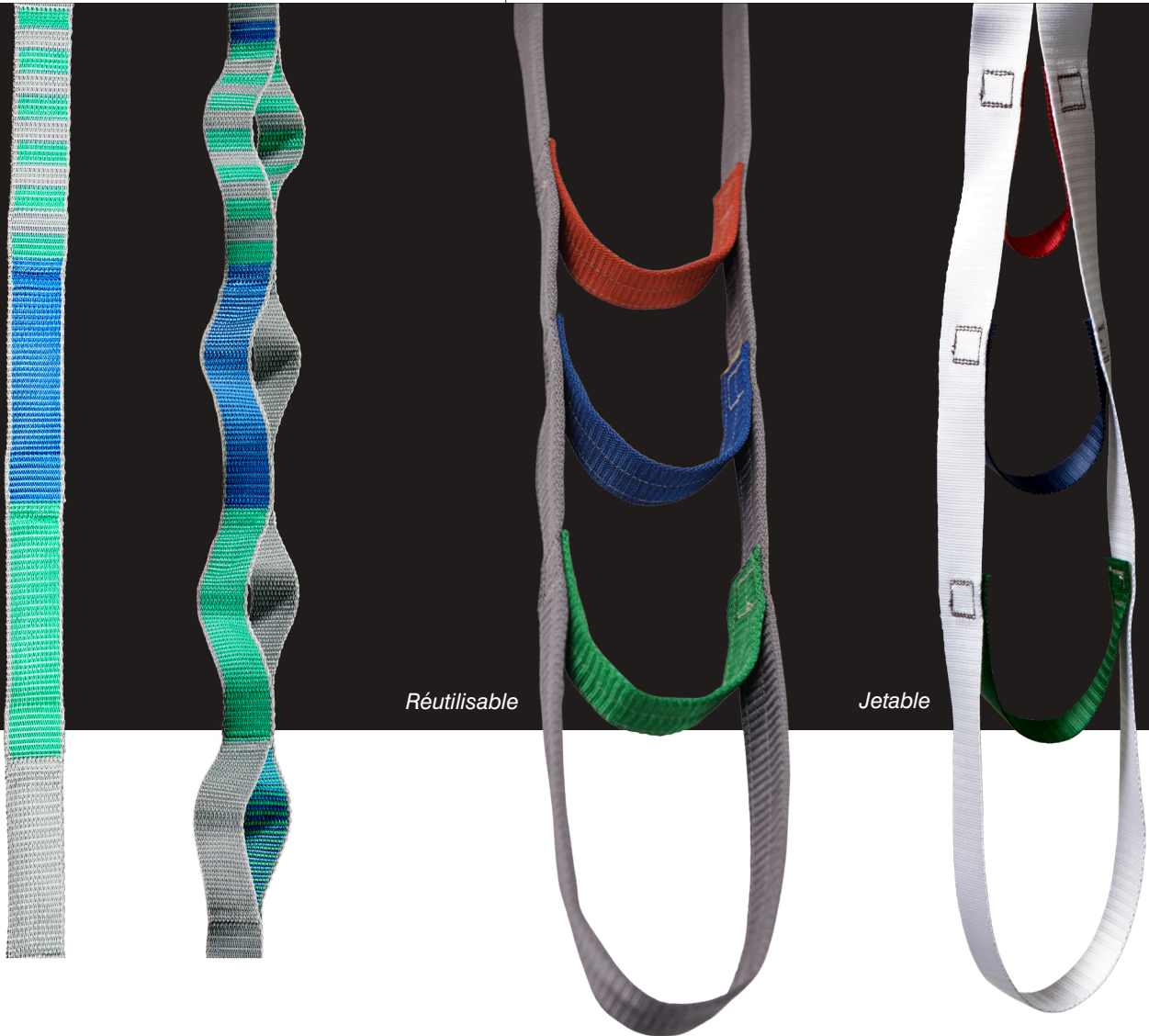

Smart Loops

Le fonctionnement et les fonctionnalités sont équivalents, ils sembleront familiers au fil des utilisations :

- Boucles distinctes et séparées – pas de changement
- Des différenciateurs de couleur permettent de distinguer les boucles : gris uni, vert uni, bleu uni, rayures vertes, rayures bleues sans changement

- La sangle Smart Loops est de la même longueur et avec la même position des boucles que la sangle standard

Améliorations

- Les Smart Loops risquent moins de se coincer dans un équipement ou de représenter un danger de chute
- Prend moins de place à l'utilisation et pour le rangement
- Poids global réduit : diminue les dépenses opérationnelles et de lavage

Astuces

- Lorsque la sangle est neuve, les Smart Loops sont plus fermées, mais au cours du temps et de l'utilisation, elles s'élargiront légèrement.
- Pour ouvrir une boucle placez deux doigts dans la boucle et écartez-la pour aider son placement sur le crochet du cintre

Time to care

V. Guldmann A/S
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
Fax +33 145 57 10 52
france@guldmann.com
www.guldmann.fr