

Sistema de rieles de pared “Wall Rail”

Libertad de movimientos: más tiempo para cuidar

Discreto y fácil de utilizar e instalar tanto en edificios nuevos como existentes

El sistema de rieles de pared “Wall Rail” es un sistema discreto que crea una solución segura, cómoda y eficaz para la elevación y traslado de personas con pérdidas funcionales. El sistema también se puede usar para ejercicios de movilidad, rehabilitación y tareas de cuidado personal.

Los rieles de pared “Wall Rail” están diseñados para ser instalados directamente en todo tipo de paredes y el riel

transversal flexible compensa automáticamente las paredes no alineadas de hasta 80 mm.

El sistema de rieles de pared “Wall Rail” se usa con los modelos de grúas de techo GH3, GH1 / GH1 Q o GHZ, que está integrado en el riel transversal. Cuando se usa el GH3, la grúa de techo se carga automáticamente en el riel, independientemente de dónde se coloque la grúa de techo en el sistema de rieles. Los modelos GH1, GH1 Q o GHZ se cargan situando el mando a distancia en la estación de carga.

Un sistema continuo de rieles “en la pared” proporciona una cobertura completa y un traslado directo y eficaz de una habitación a otra, por ejemplo, del dormitorio al cuarto de baño. Cuando no se usa, el sistema es prácticamente invisible, ya que la grúa de techo, la percha y el arnés se pueden guardar en un armario. La grúa de techo puede alcanzarse desde ambas habitaciones, ya que el armario puede abrirse desde ambos lados de la pared.

El riel de pared está preparado para la instalación opcional de luz LED y se puede usar para colgar cuadros, adornos y cortinas, entre otros.



Discreto y elegante

- El sistema queda perfectamente integrado en la habitación y es casi invisible cuando no se usa
- Armario de dos lados integrado para guardar la grúa y los arneses
- La grúa de techo se carga automáticamente en el riel (GH3) o situando el mando a distancia en la estación de carga (GH1/ GH1 Q, GHZ)
- Los rieles de pared "Wall Rail" son de color blanco (RAL 9016) y se integran discretamente en cualquier ambiente




Sistema simple y flexible

- Sistema de rieles "en la pared"
- Cobertura completa y traslado efectivo de habitación a habitación
- Movimiento consecutivo, cómodo y suave
- Fácil de utilizar




Fácil de usar

- Instalación fácil y económica
- Fácil de quitar y reutilizar
- Instalación directa en todo tipo de paredes
- El riel transversal flexible compensa automáticamente las paredes no alineadas (oblicuas) de hasta 80 mm

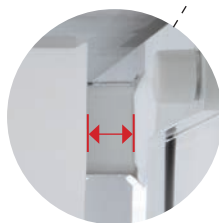

80 mm

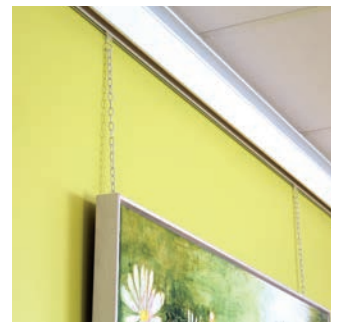

Funciones adicionales

- Preparado para la instalación opcional de luces LED
- Colocación de cuadros, adornos, cortinas, etc.

Las luces LED, los cables de suspensión y los ganchos no están disponibles en la gama de productos Guldmann.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es